

Highlights des zweiteiligen Z5s-Implantats

Z5s-40-12


> Implantat 4 mm × 12 mm

Geschraubtes zweiteiliges Bone-Level Implantat

- Innenverbindung mit optimaler Positionierung des Abutments (rotationsgesicherter Sechskant)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Austrittsprofils

Erfahrung aus über 60.000 gesetzten Implantaten

- Bewährtes endosales Design basierend auf den Tissue-Level Vorgängern sichert übertragbare Ergebnisse
- Das selbstschneidende Gewinde mit Knochenspanreservoir reduziert das Eindrehmoment
- Hervorragende Osseointegration durch bewährte, patentierte firmeneigene SLM® Laser-oberflächentechnologie und schonende Plasmasterilisation

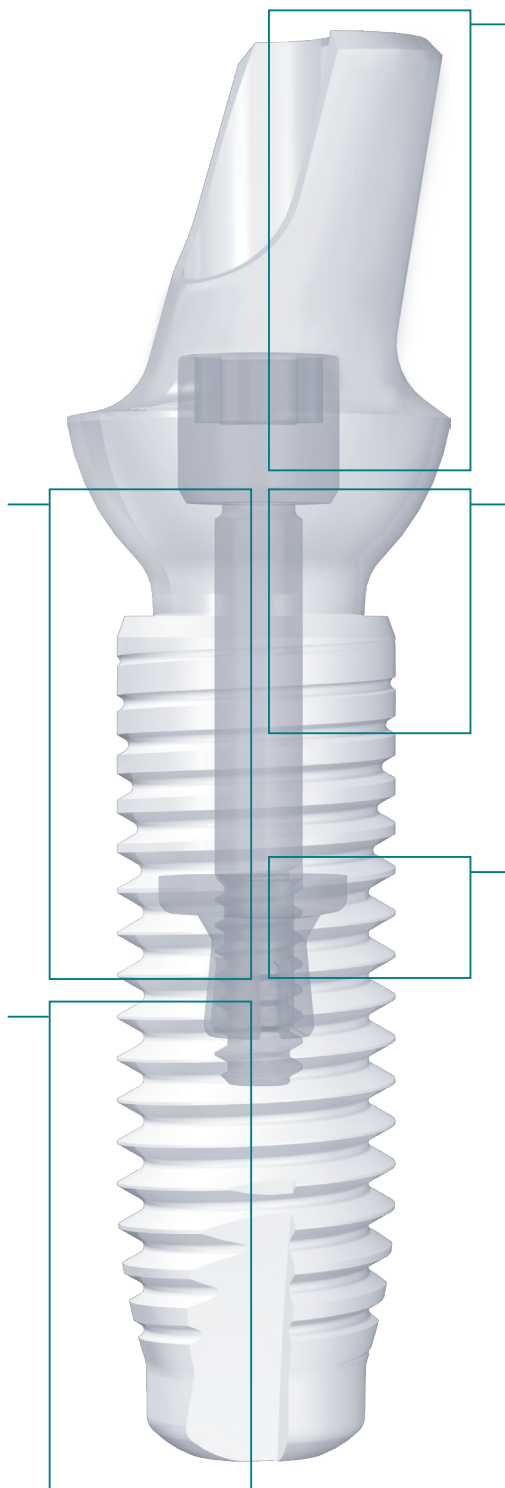

Ästhetik für die professionelle Versorgung

- gerade und 15° abgewinkelte Abutments in 1 mm Gingivahöhe. Weitere Größen sind in Planung, wir informieren Sie gerne.
- Variante mit vorgeformtem Mukosaprofil erhältlich

Hochfeste Verbindung

- Bruchfestigkeit je nach Abutment/Implantatdurchmesser bis 400 N (dynamische Ermüdung in Salzlösung lt. ISO 14801).
- Klemmkeil zur sicheren Verschraubung



Z-SYSTEMS
ceramic implants